

颈部揉捏按摩器

使用说明书

Neck K1

使用本产品前请仔细阅读本产品说明书



生产企业：深圳攀高医疗电子有限公司

生产地址：深圳市龙岗区横岗街道西坑一村工业区凤凰路25号厂房、
深圳市龙岗区横岗街道西坑社区山庄路5号厂房

售后服务单位：深圳攀高医疗电子有限公司

电话：0755-33825988

传真：0755-33825989

网址：www.pan-go.com

邮编：518115

衷心感谢您使用攀高颈部揉捏按摩器，使用前请务必阅读此手册，并妥善保管以备日后查询。
所有警告和注意事项需严格遵守！

安全注意事项



注意:

- 使用本产品时请务必仔细阅读并遵守《使用说明书》的操作指引，对不正确使用或不遵守本产品使用说明造成的后果，本公司概不负责。



警告:

- 本产品为个人护理按摩产品，不能替代药物和医疗器械；
- 儿童、孕妇请谨慎使用；
- 内有锂电池，请勿将本产品置于高温环境中；
- 皮肤感知障碍或皮肤异常、对热不敏感的用户请谨慎使用；
- 正在服用药物的患者；
- 皮肤对热过敏的用户请谨慎使用；
- 颈椎有损伤的用户请在医生的指导下谨慎使用。



建议:

- 请确认机器正常工作后方可使用；
- 初次使用时，或长时间放置后再次使用前，请确认电池状态，请确认在电量充足的状态下使用。
- 本产品不宜被儿童单独使用，除非家长或者监护人已事先对儿童就其使用方法给与充分指导。
- 请存放在不易被儿童接触的地方，放置儿童玩耍或者操作产品，以免造成意外。



下列情形，请向医生咨询后使用，否则或引起不适:

- 正在接受医生治疗，并感觉身体异常的患者；
- 心脏，神经异常的患者；
- 体温超过38度（发热期）的患者；
- 不能自主表达意愿的患者；
- 有高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者；
- 感染性疾病的患者；
- 皮肤知觉障碍或皮肤异常的患者
- 正在服用药物的患者；
- 血压异常的患者。

下列情形禁止使用:

- 恶性肿瘤患者
- 心脏起搏器使用者
- 人体心脏附近
- 有出血或出血倾向的患者
- 急性化脓性炎症患者

产品结构

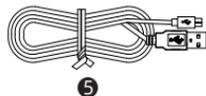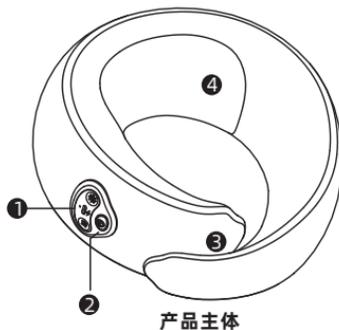

- | | |
|-------------|--------------|
| ① Type-C充电口 | ④ 按摩头 |
| ② 控制面板 | ⑤ Type-C型充电线 |
| ③ 魔术贴 | |

产品技术规格及条件

产品技术规格

产品名称: 颈部揉捏按摩器

产品型号: Neck K1

额定电压: 5V DC

额定功率: 5W

电池容量: 3.7V/1300mAh

使用时间: 10分钟

净重约: 550 g

包装尺寸: 250x105x233mm

执行标准: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008

充电电压: 5.0V $\overline{=}$ 1.0A

正常工作条件:

使用环境温度: +5°C~+40°C;

相对湿度: \leq 80%;

大气压力: 86kPa~106kPa。

运输和储存条件:

贮存环境温度: -20°C~+55°C;

相对湿度: \leq 93%;

大气压力: 50kPa~106kPa。

本产品仅适合家庭使用。




注意:

在使用此款产品时需要选用5.0V $\overline{=}$ 1.0A充电器。若产品长期不使用,半年内请对产品进行充电,激活电池。

操作说明

请检查产品及配件,本产品只配Type-C充电数据线供产品充电,充电建议使用5V/1A规格的充电头,产品自带1300mAh锂电池为产品供电。

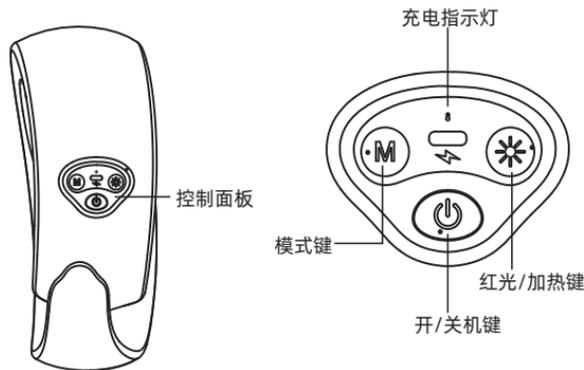

- 1、长按【】键,“滴”声,打开机器;
- 2、开机状态下,长按【】键,“滴滴滴”三声,关闭机器;
- 3、开机默认开启按摩功能,工作状态灯绿色常亮;
- 4、开机状态下,短按【】键可切换模式(活力模式/护颈模式);
- 5、开机状态下,短按【】键,可打开/关闭加热(红光)功能;打开时红光常亮,加热开启;关闭时红光和加热关闭;
- 6、自动定时为10分钟,按摩结束前“滴滴滴”三声提示音后自动关机。

注: 开机状态下,按控制面板的任何按键都有“滴”声提示音

使用后

因长时间按摩，按摩完毕后可能会出现按摩部位发红发热，属于正常现象。



注意：

充电及电量提醒功能：

- 1、在充电的情况下，产品无法开机需拔掉充电线才能开机按摩。
- 2、充电过程中橙色指示灯闪烁。
- 3、当充满电的情况下绿色指示灯长亮。
- 4、当电池电量低时，橙色指示灯闪烁，蜂鸣器“滴”声提示，需要及时给产品充电。

说明：若按摩器连续充电4小时以上仍出现橙灯闪烁（处于充电状态），请拔掉充电器，以免发生危险。

电池的取出及分类

本产品电池取出步骤：

- 1、确认产品处于关机状态；
- 2、借助工具将面板取出；
- 3、使用工具拉开布套拉链，取下布套；
- 4、将控制组件从发泡棉中取出，取下底盖；
- 5、拆解连接电池的端子线；取出电池。

正确处理方式



本标志表示此产品不可与家庭废弃物一同丢弃。为避免任意丢弃对环境与人体健康可能造成的伤害，应确实回收来增加剩余可利用物质的再使用性。回收使用过器具，请遵循回收程序，或与原购买零售商家联系。他们能将产品进行对环境安全的回收。

清洁方法

如何保养

- * 清洁产品前，请确认产品是在关闭状态。
- * 请以干净柔软的棉布擦拭清洁产品，请勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂，来清洁产品。
- * 请勿使用湿布擦拭开关控制面板，以免导致机器故障，请使用干布擦拭即可。
- * 不要将产品浸入水中或其他液体，若不慎将水泼洒在产品上，可能导致产品损坏。

感觉有脏污时请进行清洁

清洁机身

使用肥皂水浸湿的布擦去污垢。

在擦拭之前，请先将布拧干。

请勿使用酒精、油漆稀释剂、汽油或洗甲水。

否则可能损坏本产品或引起部件龟裂或褪色



收纳方法

- * 为了维持产品的清洁干净，请确保产品远离高度潮湿的地方。您应将本产品存放在原包装中，并保持在干净、干燥的地方。
- * 请勿放置在阳光直射，或高温处。
- * 若长时间没有使用。请以防尘套覆盖。

故障排除

使用操作时如出现故障，请按下列几点提示方式进行检查。请勿自行拆卸或维修，自行拆卸维修导致产品损坏卖方将不承担该情况造成的任何后果。

机件出现故障或不能启动时，请检查以下项目

状况	可能原因及处理方式
无法开机	电池电量不足，请及时充电
按摩力度弱	1、电池电量不足，请及时充电； 2、切换模式，调整不同按摩方式； 3、调整机器松紧度，让按摩更舒适
红光灯不亮	短按“  ”切换模式

如果按照以上方法还不能解决，请咨询购买的销售店或联系本公司授权的维修中心进行维修。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
电极	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

环保使用期限说明：



此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重的期限10年。

免责声明：

因未按本产品说明书使用本产品，直接或间接产生的任何身体伤害及损害，使用者请自行承担相关法律责任。攀高及其零售商均不承担相关法律责任。攀高保留随时修改本说明书的内容的权利，而没有义务另行通知任何人所做的修改。

合格证

检验日期：_____

检验员：_____

品质保证书

本保修书是购买颈部揉捏按摩器后，需要售后维修服务时使用，请妥善保管，颈部揉捏按摩器售后维修服务细则如下：

- 1、承蒙购买颈部揉捏按摩器，使用前请认真阅读产品使用说明书，并填写以下表格内容。
- 2、正常情况下使用，凭本保证书享有一年之内免费保修。保修期内的人为故障，我方免费维修，但配件费及运输费由购货方负责。
- 3、超过保修期产品的维修，我方免费维修，但配件及运输费由购货方负责。
 - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
 - (三) 无三包凭证及有效发票的；
 - (四) 三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - (五) 因不可抗力造成损坏的；
 - (六) 用于商业用途的。

产品名称：颈部揉捏按摩器_____

型号：Neck K1_____

购买者姓名：_____

电话：_____

地址：_____

购买日期：_____

代理商：_____